


バイパス回路付エアドライヤー

デントドライS150

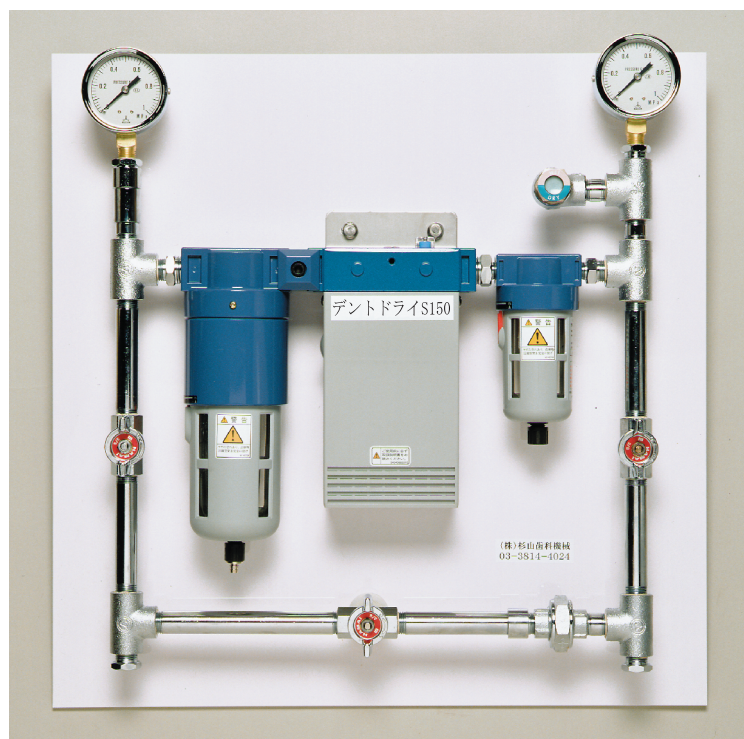

～特長～


- ・ノンフロン
- ・電気不要
- ・省スペース（壁付け、奥行き70mm）
- ・故障やメンテナンス時に便利なバイパス回路付
- ・エアーの状態が一目でわかるインジケーター付
- ・オイル、塵等除去のフィルター装備
- ・除菌効果のフィルター装備
- ・1次側、2次側圧力メーター付

エアーの乾燥状態が一目でわかるインジケーター



正常（乾燥している状態）

異常（乾燥していない状態）

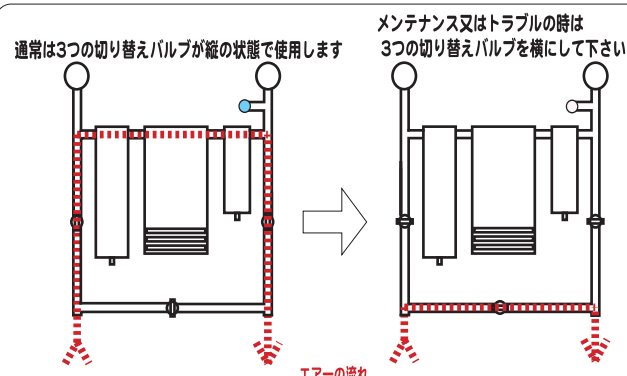

～仕様～		
使用条件	使用流体	圧縮空気
	使用圧力範囲	0.2～0.85MPa
	入口空気温度	5～55℃
	周囲温度	5～55℃
標準性能	周囲温度	30℃
	入口空気温度	28℃
	入口空気水蒸気含有量	28℃飽和
	入口空気圧力	0.7MPa
	パージ空気量	5.5l/min
	処理空気量	150l/min
	処理空気露点	-10℃
	接続配管径	RC1/4
	寸法	H550mm×W500mm×D70mm
	重量	6kg
	取付方法	壁付け

- ・コンプレッサーは1馬力以上のものをねがいます
- ・コンプレッサータンクの水抜きはしっかり行って下さい
- ・フィルターエレメントは定期交換が必要になります
- ・エアー使用量150l/min以上の場合は御相談ください

(株)杉山歯科機械

〒113-0033 東京都文京区本郷5-15-3 03-3814-4024